



AirFit™ N20

Masque nasal



99%

de patients utilisateurs
de masques nasaux ont réussi
à mettre en place le masque
AirFit N20 et à obtenir
une bonne étanchéité ¹

Rédéfinissez la notion de confort avec le masque nasal AirFit N20

ResMed innove et réinvente la définition de confort grâce à la nouvelle technologie de bulle InfinitySeal™. Le masque s'adapte aux mouvements des patients offrant confort et étanchéité, quelle que soit la taille ou la forme du visage du patient.



Facile à mettre en place

Lors d'une étude sur 159 patients¹, 99,4% ont pu mettre en place le masque et obtenir une bonne étanchéité. Dès le début du traitement, la nouvelle bulle en silicone s'adapte aux différentes formes de visage.

Confortable

De la bulle au harnais, l'AirFit N20 est léger et doux. 88 % des patients ont préféré le masque AirFit N20 en termes de confort par rapport au masque nasal leader du marché.²


Liberté visuelle

Grâce au design compact et discret du masque, les patients peuvent lire ou regarder la télévision, tout en suivant leur traitement.

[ResMed.com/AirFitN20](https://www.resmed.com/AirFitN20)

Le masque nasal favori des patients

92% des patients ont préféré le masque nasal AirFit N20 en comparaison avec un des masques nasaux leader sur le marché ^{2,3}

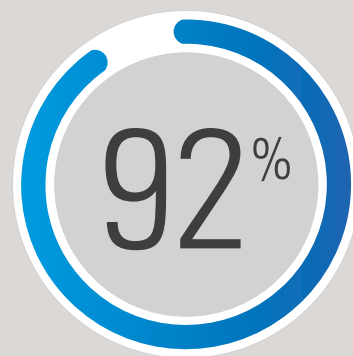

Doux et moelleux

Spécifiquement conçu pour apporter plus de douceur, le harnais aide les patients à se sentir plus rapidement à l'aise avec leur traitement.

Étanchéité

La bulle de l'AirFit N20 bénéficie de la nouvelle technologie InfinitySeal conçue pour prévenir les fuites, tolérer les erreurs de mise en place et être étanche même avec des variabilités de pression.

Extra flexible

Le circuit court se clipse sur l'entourage du masque grâce au coude à retrait rapide. Totalement flexible, le circuit permet aux patients de bouger sans provoquer de fuite.

Entourage doux


L'entourage est constitué de mousse et de tissu doux pour apporter plus de douceur et de confort sur le visage.

Champ de vision dégagé


Laissons aux patients l'opportunité de voir, grâce à l'entourage sans support frontal qui combine stabilité et contact réduit avec le visage.

Mise en place rapide


Le masque s'installe et se retire facilement et rapidement grâce aux clips magnétiques qui guident en un instant le harnais vers l'entourage.

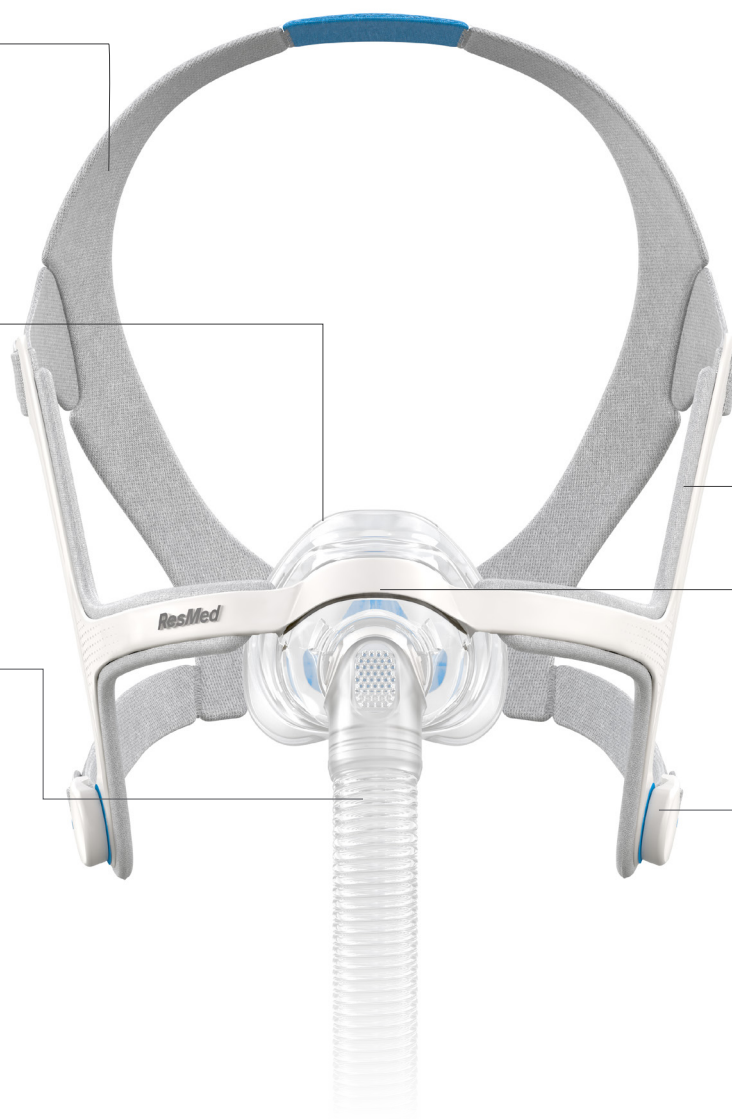

Lors d'une étude internationale sur 159 patients, 99% des participants ont pu mettre en place le masque et obtenir une bonne étanchéité.¹

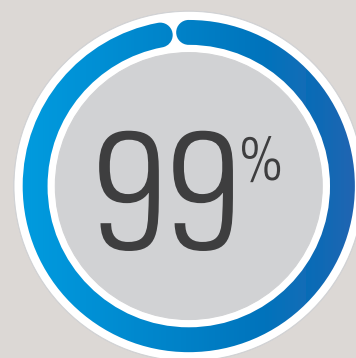

Avec très peu de composants, le masque AirFit N20 est facile à utiliser et à nettoyer

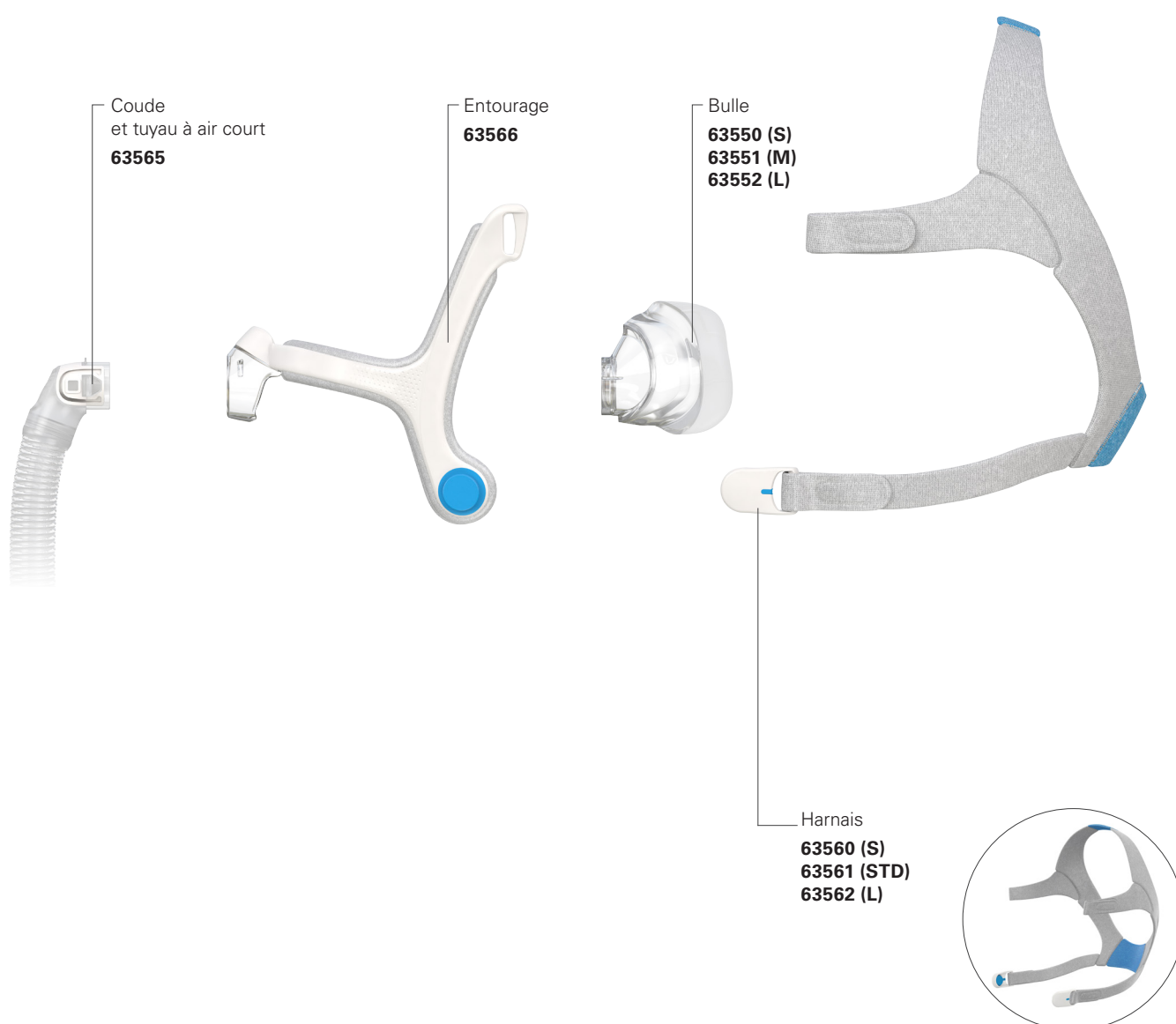


Choix de la taille

L'AirFit N20 possède 3 tailles de bulles : small, medium et large. Grâce à la conception modulaire de l'AirFit N20, chaque taille de bulle se fixe aisément à l'entourage. Il est ainsi plus facile d'échanger les bulles pour plus de flexibilité.

Afin de choisir la taille la plus adaptée, utilisez le gabarit de l'AirFit N20 comme guide.

Vous pouvez le télécharger sur le site [ResMed.com/AirFitN20](https://www.ResMed.com/AirFitN20)

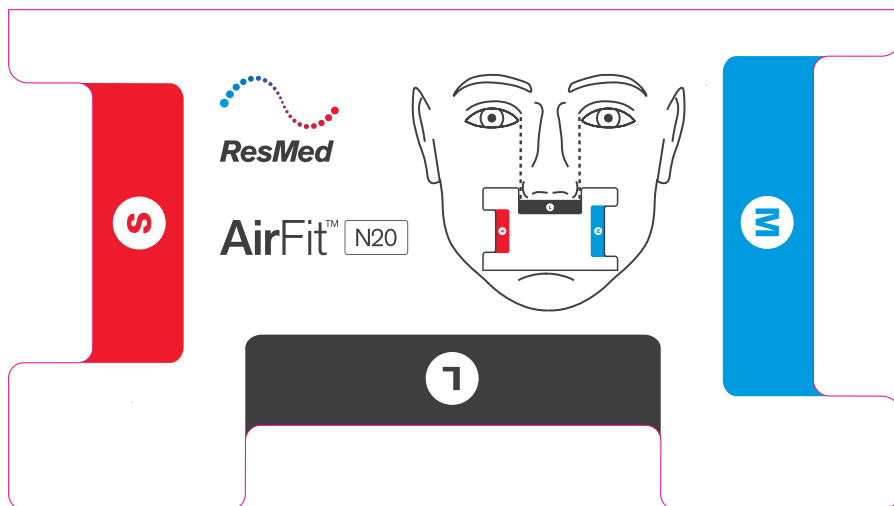


Taille réelle

Codes produits


AirFit N20: Small	63509
AirFit N20: Medium	63511
AirFit N20: Large	63512



88% des patients pensent que le masque AirFit N20 est plus confortable que l'un des masques nasaux leader sur le marché ^{2,3}

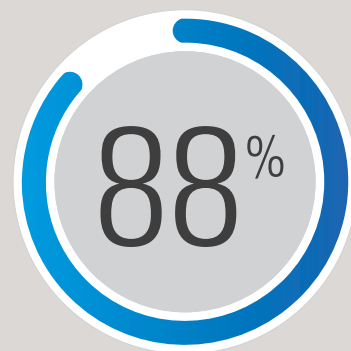

La technologie de la bulle évolue : plusieurs épaisseurs pour plus de confort et de stabilité

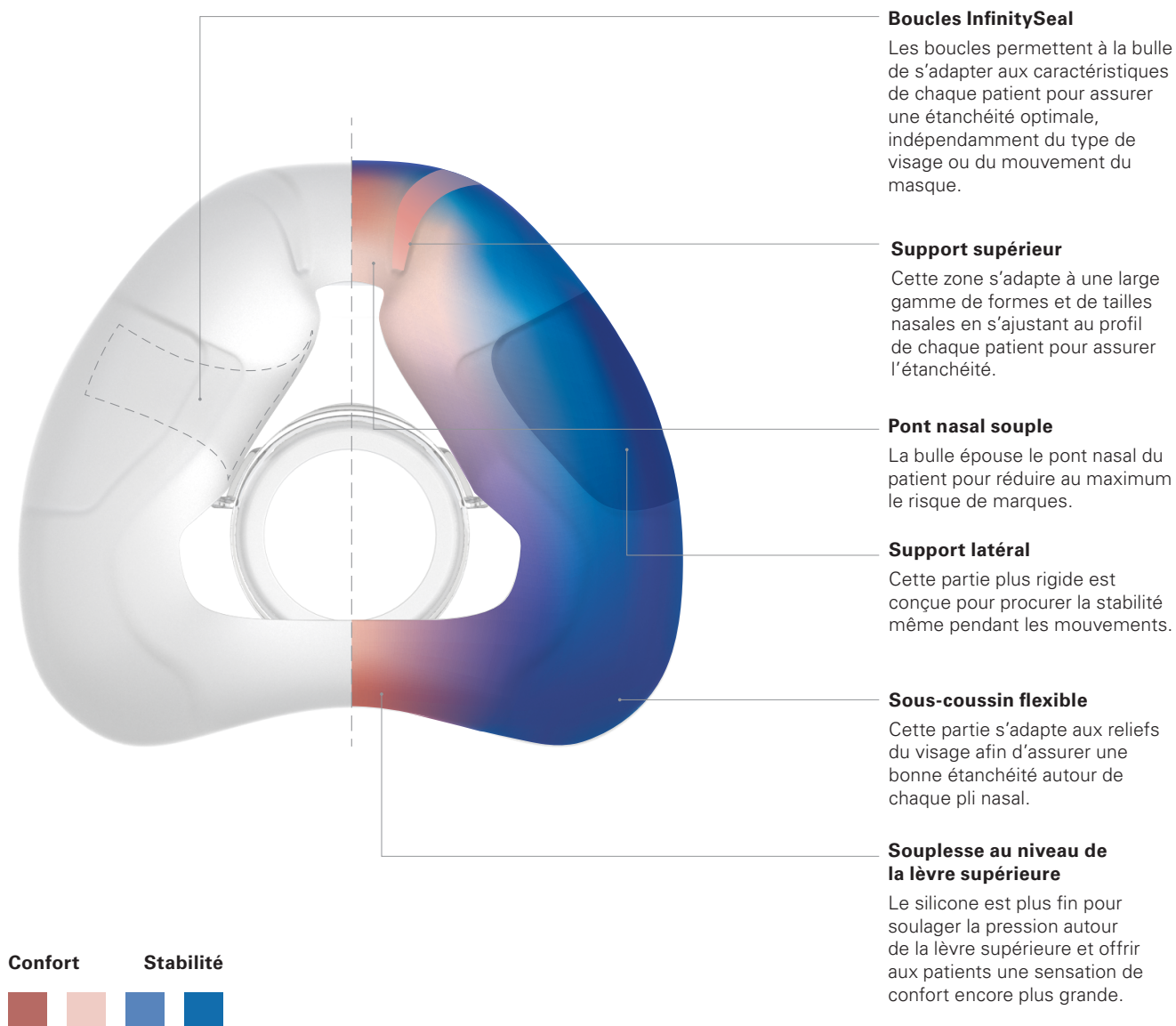

Guide de mise en place du masque nasal AirFit N20



- Assurez-vous que les clips magnétiques des sangles inférieures sont bien détachés.
- Si les clips sont connectés, détachez-les de l'entourage.



- Faites passer le harnais par dessus votre crâne en vous assurant que le logo ResMed est tourné vers l'extérieur.



- Passez les sangles inférieures sous vos oreilles et attachez les clips magnétiques sur les côtés de l'entourage.



- Détachez les bandes velcro® des sangles supérieures du harnais.
- Ajustez les sangles uniformément jusqu'à ce que le masque soit confortable et stable, puis rattachiez les bandes adhésives.



- Faites de même avec les attaches velcro® des sangles inférieures du harnais.



- Mettez votre appareil en marche et connectez le circuit au masque.
- Finalisez l'ajustement de la bulle et du harnais jusqu'à ce que le masque soit confortable.

Remarque : pour les instructions d'utilisation complètes, reportez-vous au guide d'utilisation.



Conseil

- Ajustez la sangle inférieure du harnais au-dessus ou en dessous de vos cheveux, en fonction de votre préférence.

1 Etude de mise en place ResMed ID A3697629. 159 patients utilisateurs de masques nasaux. Comparaison des masques AirFit N20 (ResMed) et Wisp (Philips). USA, Europe et Asie-Pacifique. Novembre 2015.
2 Etude interne ResMed ID A3695085. Comparaison du masque AirFit N20 (ResMed) et du masque Wisp (Philips). 24 patients. Décembre 2015.
3 Wisp est identifié comme l'un des leaders sur les segments de masques nasaux d'après des données de marché US - données disponibles sur demande.



ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australia


EC REP ResMed (UK) Ltd, 96 Jubilee Avenue,
Milton Park, Abingdon, Oxfordshire - OX14 4R,
Royaume-Uni
Distribué par ResMed SAS, Parc technologique
de Lyon - 292 Allée Jacques Monod, 69791
Saint-Priest Cedex, France.

AirFit, InfinitySeal et Quick Fit sont des marques déposées de ResMed Ltd. AirFit est une marque commerciale de ResMed Ltd.
Le masque nasal AirFit N20 est destiné à acheminer au patient de façon non-invasive le débit d'air produit par un appareil à pression positive tel qu'un appareil de PPC ou à deux niveaux de pression. Prévu pour une utilisation par des patients pesant plus de 30 kg à qui un traitement par pression positive a été prescrit. Usage multiple par un seul patient à domicile ou pour un usage multiple par plusieurs patients en milieu médical - Dispositif médical de classe IIa - Evaluation de la conformité par TÜV0123 - Lire attentivement le manuel utilisateur fourni avec le dispositif - Pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site www.ameli.fr © 2016 ResMed Ltd. 1019685/1 2016-10



Le masque nasal favori des patients

92% des patients ont préféré le masque nasal AirFit N20 en comparaison avec un des masques nasaux leader sur le marché ^{2,3}

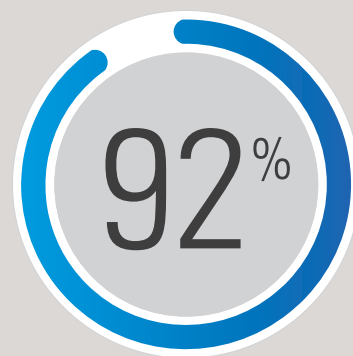

Doux et moelleux

Spécifiquement conçu pour apporter plus de douceur, le harnais aide les patients à se sentir plus rapidement à l'aise avec leur traitement.

Étanchéité

La bulle de l'AirFit N20 bénéficie de la nouvelle technologie InfinitySeal conçue pour prévenir les fuites, tolérer les erreurs de mise en place et être étanche même avec des variabilités de pression.

Extra flexible

Le circuit court se clipse sur l'entourage du masque grâce au coude à retrait rapide. Totalement flexible, le circuit permet aux patients de bouger sans provoquer de fuite.

Entourage doux

L'entourage est constitué de mousse et de tissu doux pour apporter plus de douceur et de confort sur le visage.

Champ de vision dégagé


Laissons aux patients l'opportunité de voir, grâce à l'entourage sans support frontal qui combine stabilité et contact réduit avec le visage.

Mise en place rapide


Le masque s'installe et se retire facilement et rapidement grâce aux clips magnétiques qui guident en un instant le harnais vers l'entourage.



Lors d'une étude internationale sur 159 patients, 99% des participants ont pu mettre en place le masque et obtenir une bonne étanchéité.¹

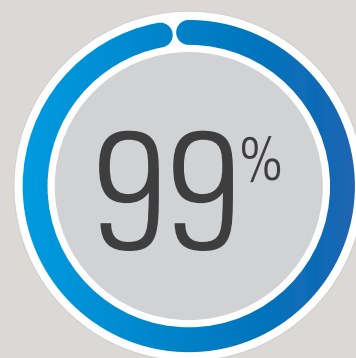

Avec très peu de composants, le masque AirFit N20 est facile à utiliser et à nettoyer

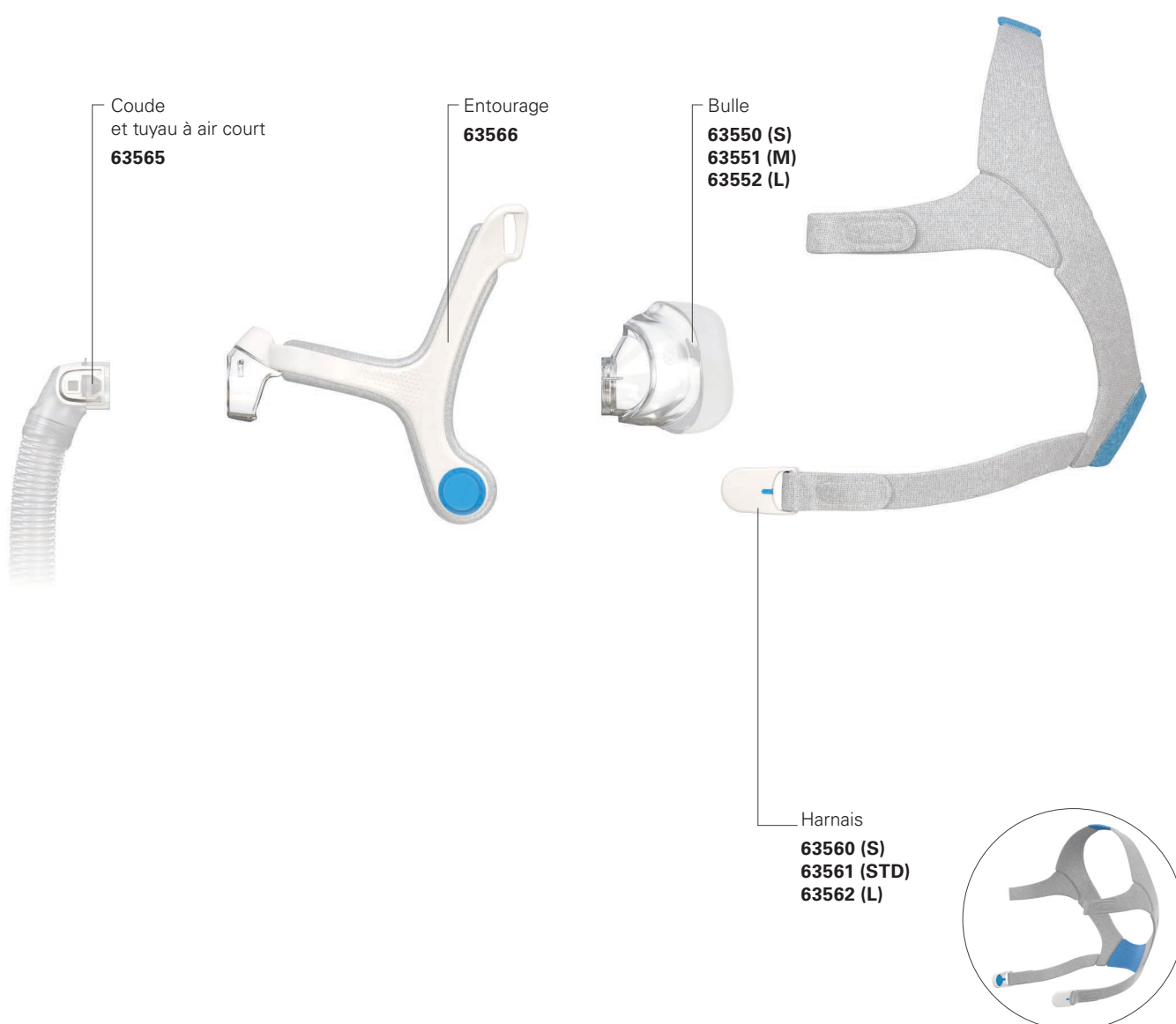


Choix de la taille

L'AirFit N20 possède 3 tailles de bulles : small, medium et large. Grâce à la conception modulaire de l'AirFit N20, chaque taille de bulle se fixe aisément à l'entourage. Il est ainsi plus facile d'échanger les bulles pour plus de flexibilité.

Afin de choisir la taille la plus adaptée, utilisez le gabarit de l'AirFit N20 comme guide.

Vous pouvez le télécharger sur le site [ResMed.com/AirFitN20](https://www.ResMed.com/AirFitN20)

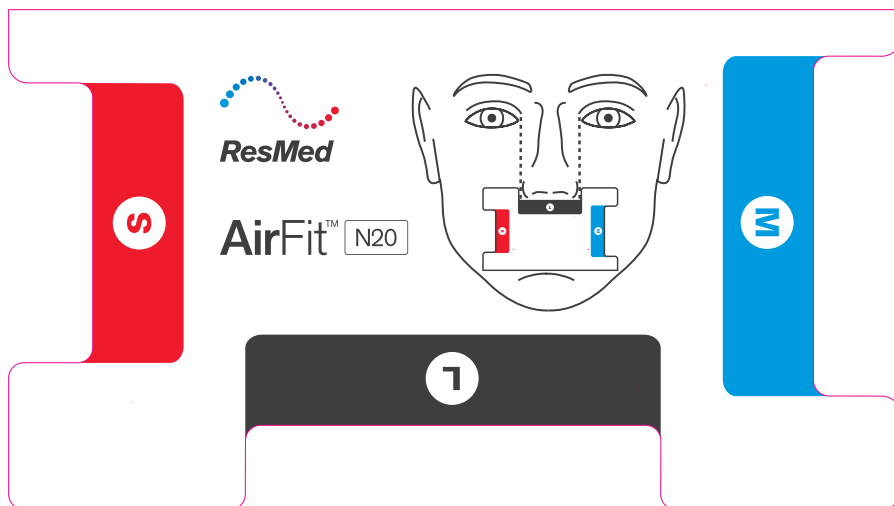


Taille réelle

Codes produits


AirFit N20: Small	63509
AirFit N20: Medium	63511
AirFit N20: Large	63512



88% des patients pensent que le masque AirFit N20 est plus confortable que l'un des masques nasaux leader sur le marché ^{2,3}

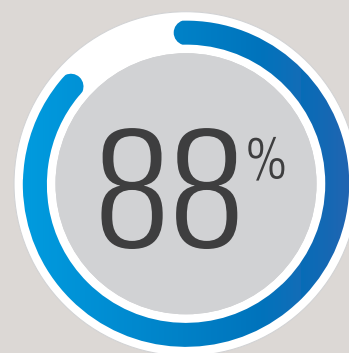

La technologie de la bulle évolue : plusieurs épaisseurs pour plus de confort et de stabilité

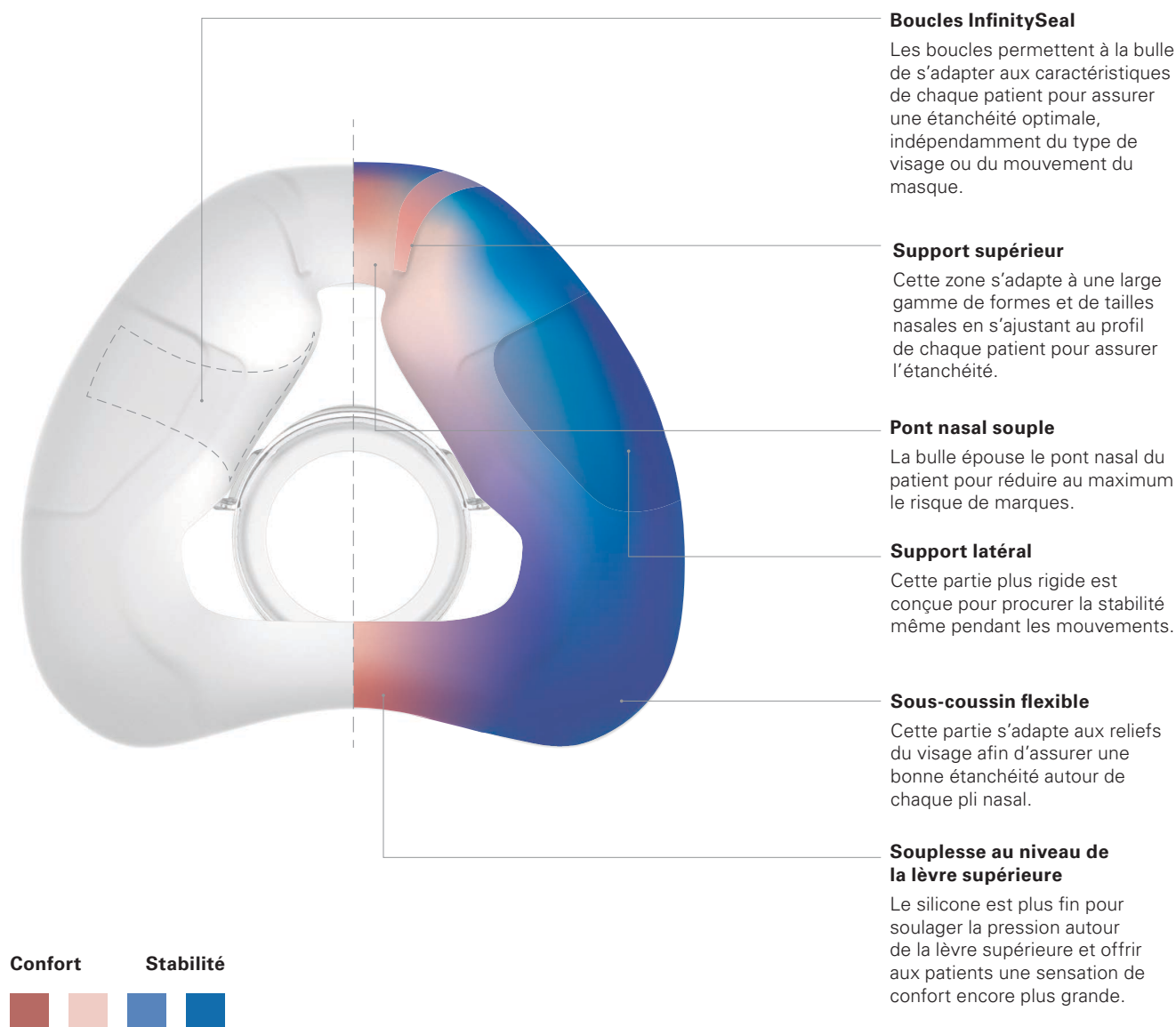

Guide de mise en place du masque nasal AirFit N20



- Assurez-vous que les clips magnétiques des sangles inférieures sont bien détachés.
- Si les clips sont connectés, détachez-les de l'entourage.



- Faites passer le harnais par dessus votre crâne en vous assurant que le logo ResMed est tourné vers l'extérieur.



- Passez les sangles inférieures sous vos oreilles et attachez les clips magnétiques sur les côtés de l'entourage.



- Détachez les bandes velcro® des sangles supérieures du harnais.
- Ajustez les sangles uniformément jusqu'à ce que le masque soit confortable et stable, puis rattachiez les bandes adhésives.



- Faites de même avec les attaches velcro® des sangles inférieures du harnais.



- Mettez votre appareil en marche et connectez le circuit au masque.
- Finalisez l'ajustement de la bulle et du harnais jusqu'à ce que le masque soit confortable.

Remarque : pour les instructions d'utilisation complètes, reportez-vous au guide d'utilisation.



Conseil

- Ajustez la sangle inférieure du harnais au-dessus ou en dessous de vos cheveux, en fonction de votre préférence.

1 Etude de mise en place ResMed ID A3697629. 159 patients utilisateurs de masques nasaux. Comparaison des masques AirFit N20 (ResMed) et Wisp (Philips). USA, Europe et Asie-Pacifique. Novembre 2015.
2 Etude interne ResMed ID A3695085. Comparaison du masque AirFit N20 (ResMed) et du masque Wisp (Philips). 24 patients. Décembre 2015.
3 Wisp est identifié comme l'un des leaders sur les segments de masques nasaux d'après des données de marché US - données disponibles sur demande.



ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australia

EC REP ResMed (UK) Ltd, 96 Jubilee Avenue,
Milton Park, Abingdon, Oxfordshire - OX14 4R,
Royaume-Uni
Distribué par ResMed SAS, Parc technologique
de Lyon - 292 Allée Jacques Monod, 69791
Saint-Priest Cedex, France.

AirFit, InfinitySeal et Quick Fit sont des marques déposées de ResMed Ltd. AirFit est une marque commerciale de ResMed Ltd.
Le masque nasal AirFit N20 est destiné à acheminer au patient de façon non-invasive le débit d'air produit par un appareil à pression positive tel qu'un appareil de PPC ou à deux niveaux de pression. Prévu pour une utilisation par des patients pesant plus de 30 kg à qui un traitement par pression positive a été prescrit. Usage multiple par un seul patient à domicile ou pour un usage multiple par plusieurs patients en milieu médical - Dispositif médical de classe IIa - Evaluation de la conformité par TÜV0123 - Lire attentivement le manuel utilisateur fourni avec le dispositif - Pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site www.ameli.fr © 2016 ResMed Ltd. 1019685/1 2016-10

