




Canules nasales

Une gamme de canules nasales, pour l'adulte, l'enfant et le nouveau-né

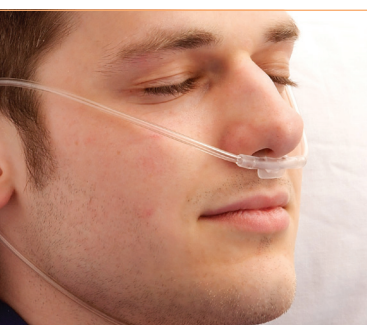

Oxygénothérapie ▪ Canules nasales



Canules nasales

Canules nasales classiques

Une gamme conçue pour l'adulte, l'enfant ou le nouveau-né disponible dans un large choix de formes d'embouts pour convenir aux besoins de chaque patient.

Chaque tubulure à oxygène est pourvue d'une lumière interne étoilée, permettant de maintenir le débit d'oxygène même en cas de plicature.

Egalement disponibles en version Satin


Comparées aux canules standards, les canules en matière satinée souple d'Intersurgical ont prouvé lors de tests une réduction de 20% de la friction^[1] sur le visage et les oreilles du patient.

Formes des embouts

Les canules nasales sont déclinées selon les formes d'embouts suivants :


Courbes :

Forme anatomique pour un ajustement confortable

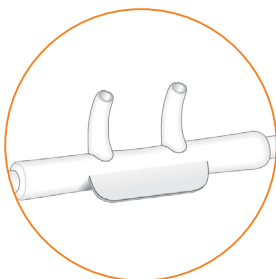


Evasés :

Atténuent le débit d'oxygène en sortie d'embouts

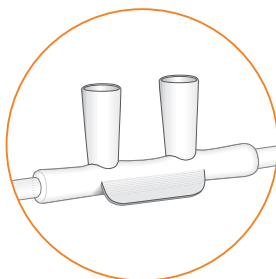


Courbes et évasés :

Combinent les avantages de chacun

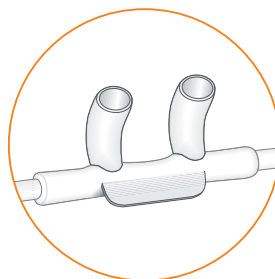

Droits :

Forme traditionnelle

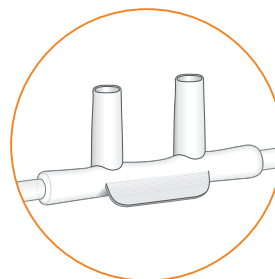

Canules nasales avec protections d'oreilles

Une gamme équipée de coussinets souples en mousse de silicone, non amovibles et aisément ajustables, afin de prévenir l'ulcération des oreilles du patient.



Canules nasales sans phtalates

La gamme de canules nasales sans phtalates a été conçue pour répondre à la réglementation sur l'exposition au DEHP du nouveau-né nécessitant des soins intensifs en service de néonatalogie.





Tuyau oxygène à lumière interne étoilée

Permet de maintenir le débit d'oxygène même en cas de plicature du tuyau

Bague anti-glisse

Permet à l'utilisateur d'adapter la longueur de la boucle pour un ajustement optimal

Sans latex

Pour prévenir le risque d'allergies

Matière transparente

Discrète et facilite la détection d'obstruction

(également disponible en matière Satin à faible friction)

Positionnement sur les oreilles

Stabilité et sécurité

(protections d'oreilles disponibles pour un confort accru)

Embouts souples

Minimisent l'irritation

Languette de maintien


Aide au positionnement optimum des embouts

Versions courtes sans tuyau

Pour une utilisation avec une rallonge



Gamme de canules nasales adultes

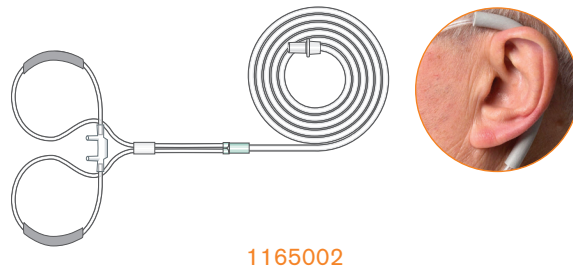

Réf.	Description	Long.	Qté/bte
1161000	Canule nasale adulte, embouts droits et tuyau	1.8m	50
1161004	Canule nasale adulte, embouts droits et tuyau	2.1m	50
1162000	Canule nasale adulte, embouts droits et tuyau	5m	20
1169000	Canule nasale adulte, embouts droits, sans tuyau (à utiliser avec une rallonge)	0.5m	100
1165000	Canule nasale adulte, embouts courbes et tuyau	1.8m	50
1161020	Canule nasale Satin adulte, embouts droits et tuyau	1.8m	50
1161021	Canule nasale Satin adulte, embouts droits et tuyau	2.1m	50
1165020	Canule nasale Satin adulte, embouts courbes et tuyau	1.8m	50
1165021	Canule nasale Satin adulte, embouts courbes et tuyau	2.1m	50
1165002	Canule nasale adulte, embouts courbes, tuyau et protections d'oreilles	2.1m	50
1165003	Canule nasale adulte, embouts courbes, tuyau et protections d'oreilles	5m	40
1166000	Canule nasale adulte, embouts évasés et tuyau	1.8m	50
1167000	Canule nasale adulte, embouts courbes/évasés et tuyau	1.8m	50
1168000	Canule nasale adulte, embouts courbes/évasés sans tuyau (à utiliser avec une rallonge)	0.5m	100

Gamme de canules nasales pédiatriques et néonatales

Réf.	Description	Long.	Qté/bte
1163000	Canule nasale pédiatrique, embouts courbes et tuyau	2.1m	50
1164000	Canule nasale néonatale, embouts courbes et tuyau	2.1m	50

Gamme de canules nasales néonatales sans phtalates

Réf.	Description	Long.	Qté/bte
1160002	Canule nasale pour nourrisson, embouts courbes et tuyau	2.1m	50 
1160001	Canule nasale pour nouveau-né, embouts courbes et tuyau	2.1m	50 
1160000	Canule nasale pour prématuré, embouts courbes et tuyau	2.1m	50 

 option sans phtalates pour prématuré, nouveau-né et nourrisson

IS10.8 • Issue 7 11.14



33, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - Le Péripole 94127 Fontenay Sous Bois Cedex
T: +33 (0)1 48 76 72 30 F: +33 (0)1 48 76 91 38 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr

UK • France • Germany • Spain • Portugal • Italy • Netherlands
Sweden • Lithuania • Russia • Czech Republic • South Africa
China • Japan • Taiwan • Philippines • USA • Australia



Pensez-y avant d'imprimer
Economisons les ressources.
Si vous devez imprimer ce document, faites-le recto verso.

Intersurgical Ltd est certifié ISO 14001, ISO 9001 et ISO 13485